

# イオン効果で 虫歯・歯周病予防



イオン歯ブラシ

ブラシ  
交換式

**IONIC**  
[アイオニック]

一般的な歯ブラシと比べ、イオン効果で

歯垢除去率 **48%アップ**

大学臨床テスト実証済み

大切な歯を守る歯ブラシも、いまやイオンの時代。

マイナスイオンによる歯垢が落ちるしくみ

ionicはイオン発生電池を内蔵しているため、毛先からマイナスイオンを発生し、架橋結合を緩ませる(脱極作用)ことで簡単に歯垢を除去<sup>\*1</sup>します。

歯垢除去率はイオンが発生しない手磨き用歯ブラシと比べて48%アップ。

歯垢は口臭の原因のひとつでもあるため、ionicは口臭予防にも役立ちます。

※1: マイナスイオン効果臨床テスト実施済 (東京歯科大学・広島大学・九州歯科大学・東京医科歯科大学・米国マーケット大学等)



歯垢(通常マイナスに帯電)は唾液中のカルシウム等のプラスイオンの作用で歯(通常はマイナスに帯電)の表面に吸着しているといわれています(架橋結合)



「ionic」は内蔵電池から微弱電流を流すことで毛先にマイナスイオンを発生させてこの結合を電氣的に緩めて歯垢を落としやすくします(脱極作用)



# 一般的な歯ブラシとionic歯ブラシを使用した際の比較

## イオン効果検証

染め出し後  
左右2分間ずつブラッシング

※弊社協力歯科医院様からのご提供




右側が一般的な歯ブラシ 左側がionic歯ブラシ(スリムヘッド)使用

## 抗菌毛で清潔・安心

ionicの抗菌毛は「バクテキラー」※1を添加。  
雑菌の増殖を抑制し※2、ブラシを清潔に保ちます。

※1 富士ケミカル(株)製 ※2 JIS Z2801 抗菌性試験による

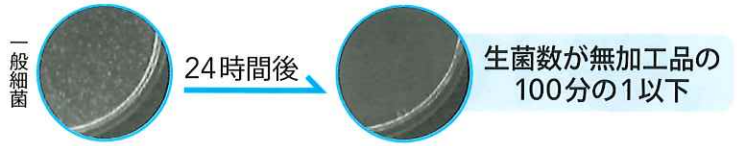

生菌数が無加工品の  
100分の1以下



左から  
○ ホワイト  
○ ライトピンク  
○ ライトブルー

1本  
患者参考価格(税込)  
**880円**  
本体6本(各2色)  
ディスプレイ箱入

柄の材質	ABS/PP樹脂
毛の材質	飽和ポリエステル樹脂
毛のかたさ	やわらかめ
耐熱温度	80℃

### 抗菌フラット毛

スリムヘッド  
やわらかめ



### 抗菌フラット毛

薄型コンパクトヘッド  
やわらかめ




ブラシ交換を行うことで  
廃棄プラスチックを大幅に  
削減することができます

- スリムヘッド  
フラット3列
- 薄型コンパクトヘッド  
フラット4列

替えブラシ

2本入  
患者参考価格(税込)  
**440円**

### 使い方

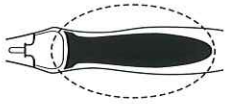

「背面の黒い部分」に  
手が触れるようにして磨くことで  
イオンが発生します。  
触れる手を濡らしておくと  
より効果的です。

### お手入れ方法



「クルッ」  
ブラシヘッドをつかみ本体を  
回して取り外してください。  
回しにくい場合は  
まっすぐ引き抜いてください。



「カチッ」しっかり差し込む  
ご使用後はブラシを外し  
水でよく洗い流してから  
取り付けてください。

### 電池残量の確認



ランプが光れば残量OK  
ボタンを押す  
ブラッシング中にボタンを  
押す必要はありません。  
電池寿命:1日15分使用で1年以上  
※電池交換はできません

取扱店

販売元

Quest

株式会社クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1  
お問い合わせ 0885-38-9777

製造元

アイオニック株式会社

〒270-0145 千葉県流山市名都借(なづかり)914-1

