


# BRILLICA bianco

## LET'S BRILLICA スタイル

新しいコンセプトでデザイン開発された  
ホワイトニングライト(ブリーチングライト)です。  
本体約100gという軽量設計で、患者様への負担を  
抑えブリリカ用開口器への装着を可能にしました。

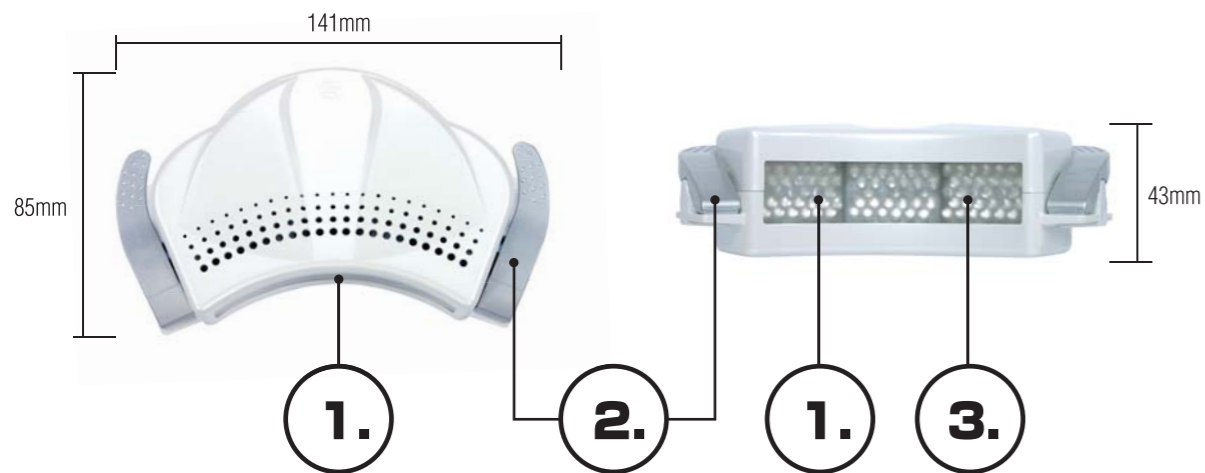

- 3種類の波長のLEDを90個搭載したライトは発光波長域が広いので、様々なオフィスホワイトニング用薬材に適応します。
- ブリリカ用開口器への着脱が可能でクリップは、掴みやすさと確実性を重視した安心・安全設計です。
- 特殊な拡散板により光を絞り、また均一にすることで患者様の眩しさを抑え、効果的な照射を行います。



詳しい説明・施術風景の動画はこちらから

### ブリリカ ビアンコ パッケージ内容



■ 本体



■ コントローラ  
リチウムイオンバッテリー搭載によりコードレス化



■ お知らせ受信機  
緊急停止時と終了時に振動と音でお知らせ



■ ブリリカ用開口器S(1個)  
ブリリカ用開口器SS(1個)  
(口角鉤 ダブルワイダー)  
(11B1X1000650D205)



■ 保護めがね



■ 収納袋



■ 院内掲示用パネル



■ 患者様用リーフレット  
(50部)



■ 口唇・口腔シート化粧品  
リップリー (1箱10枚入)



カタログ・使用方法の動画はこちらから

|               |                         |                |           |           |   |
|---------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 電源            | リチウムイオンバッテリー            | 連続使用可能時間(満充電時) | 約80分      | 製品コード/JAN | A254/04560200854149                     |
| 充電器定格 50/60Hz | AC100V 0.3A             | 充電時間           | 約150分     | 医療機器届出番号  | 14B2X00036000008<br>(一般医療機器・特定保守管理医療機器) |
| 光源LED         | φ3 LED × 90個            | タイマー設定時間       | 0.5~20分   | 一般的名称     | 歯面漂白用加熱装置                               |
| 寸法(本体)        | W141×D85×H43 / 約100g    | 発光波長域          | 400~480nm | 販売名       | ブリリカ ビアンコ                               |
| (コントローラ)      | W68×D128×H50 / 約230g    | 照射エリア          | W70×H25mm |           |   |
| (お知らせ受信機)     | W61×D103.5×H18.5 / 約90g |                |           |           |   |

\*上記は温度20℃の場合の測定値です。\*寸法の単位はmmです。  
\*仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 東京技研 URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760  
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876  
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市泉区八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653  
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市名東区香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356  
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市博多区山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376  
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445  
 【物流センター】〒224-0023 横浜市都筑区東山田 4-43-17 (ISO13485 認証工場)

■性能向上のため、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■通知機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。



JQA-MD0058  
株式会社  
歯科用吸引装置、  
歯科用吸引装置ポンプ、  
電動式吸引装置及び  
歯面漂白加熱装置の  
設計・開発及び製造

お問い合わせ

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

## 開口器にセット || BRILLICA スタイル

ホワイトニングの新しいスタイルです。

BRILLICAスタイルは、直接開口器に取り付ける、新しいタイプのホワイトニングのスタイルです。動いても照射位置が一定なので効率的な施術が可能になり、患者様の動いてはいけないというストレスが軽減されます。従来型のスタンドタイプとは異なり、軽量・コンパクト、そして洗練されたフォルムのBRILLICAをぜひ一度お試しください。



さらに  
パワーアップした  
光出力!  
50mW/cm<sup>2</sup>  
↓  
100mW/cm<sup>2</sup>

安心・安全の  
日本製!!


リチウムイオン  
バッテリー搭載により  
コードレス化  
コントローラ

緊急停止時と  
終了時に  
振動と音でお知らせ  
お知らせ受信機

本体の軽量化に成功  
100gの軽さ!

より効果的に  
照射できる  
拡散板を採用

### 本体を開口器にセット = 位置あわせ完了

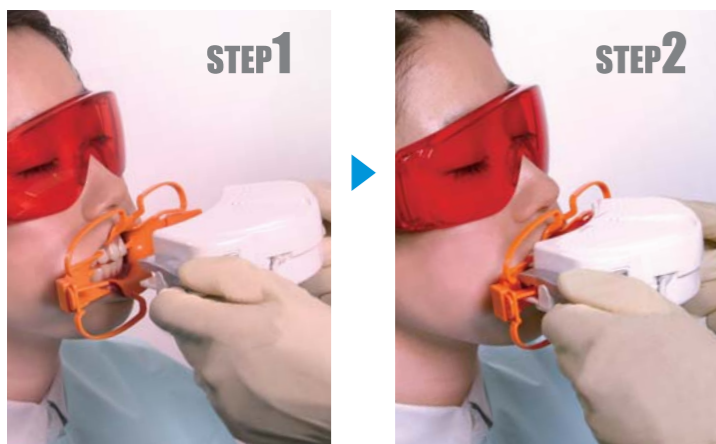


開口器への取付けはカンタン&スピーディー。  
BRILLICAスタイルは、照射位置が一定なので、  
手軽で自由なホワイトニング施術が可能になりました。

軽量なので施術中の患者様の負担を軽減します。  
非常停止機能付のコントローラでさらに安心です。

※ 光源には発熱の少ないLEDを使用しているので患者様の負担を軽減します。

### ブリリカ ビアンコ 照射光の発光波長域

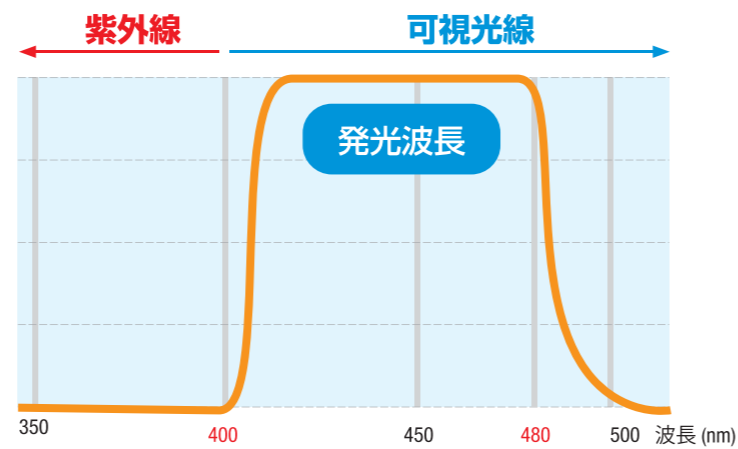

ブリリカ ビアンコには3つの異なる波長のLEDを搭載しており、**400~480nm**という幅広い範囲での発光波長域を実現しています。この発光波長域の広さは、光照射タイプの様々なオフィスホワイトニング用薬材に適応します。

### BRILLICA ホワイトニング施術例 ※ 写真はブリリカを使用した例です。写真提供/AO1 DENTAL CLINIC(青山)、富永歯科クリニック(長崎)


症例1 20代/女性




症例2 20代/女性




症例3 20代/女性

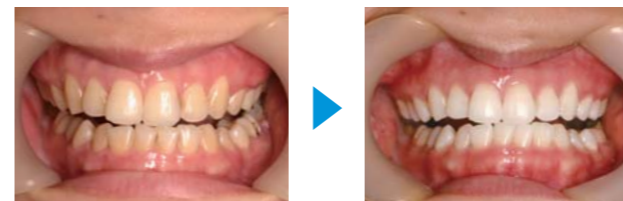

症例4 30代/女性

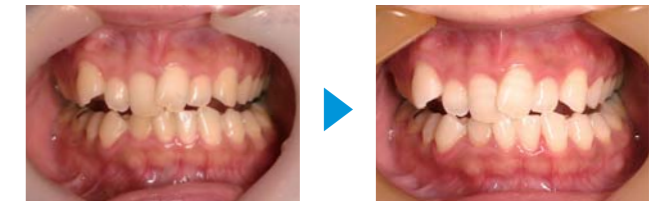

症例5 40代/女性

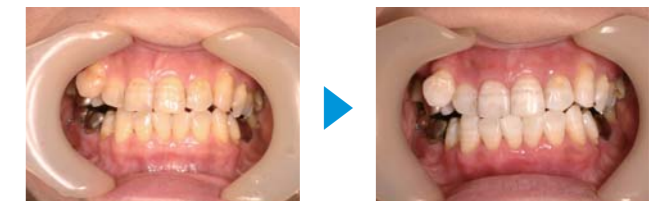

症例6 50代/男性

