



セラミックスを

切る

写真ご提供：松田 信介 先生 (Matsuda Oral Appliance、大阪市)



Quality Products
Made in Germany





Komet U K C u t t e r

ウルトラカッター

研磨のしやすい滑らかな切削面で ダイヤモンドポイントの削合力


滑らかな切削面

切削面がすりガラス状にならないので
調整面の性状を確認できます

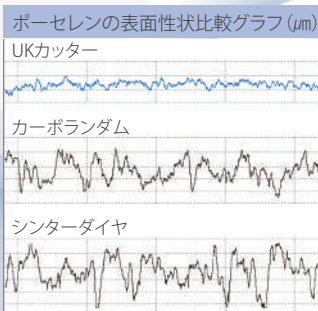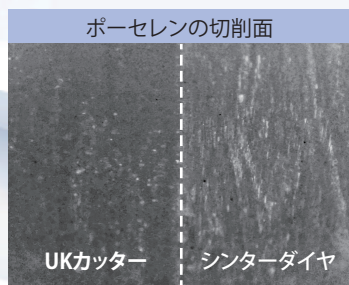


高い切削力

ポーセレン・硬質レジン・メタルをサクサク削る
ウルトラファインブレード

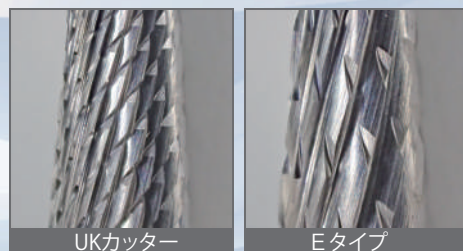

移行部調整

メタルフレームとポーセレンの移行部を
研磨のしやすい滑らかな面に仕上げます

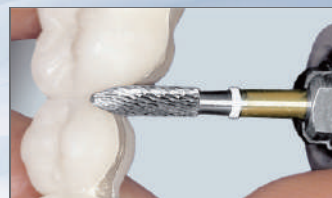

写真ご提供：松田 信介 先生 (Matsuda Oral Appliance、大阪市)



H139UKIによる形態修整



H349Iによる裂溝付与



- CAD/CAM冠
- ポーセレン
- 硬質レジン
- メタル

品番	H77UK-023	H129UK-023	H138UK-023	H139UK-023
最大径	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm
作業長	5.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm
適用材料	CAD/CAM冠、ポーセレン、硬質レジン、ノンプレシャスメタル、プレシャスメタル			
適正回転数/毎分	ポーセレン 25,000 rpm / 硬質レジン、メタル 15,000 rpm			
カラーコード	シャンク：ゴールド / ライン：白			
標準医院価格	4,300円(1本入)			

先端径 0.2mm

関連製品

H349-005
0.5mm
2.7mm
同左
15,000rpm
—
1,300円(1本入)
5,800円(5本入)

「裂溝・窩の形成用」

届出番号：27B2X00091000004
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具

※製品形状はほぼ実物大です

お問い合わせは



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-8691 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)

九州営業所 〒816-0093 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)

URL : <http://www.momose-dm.co.jp/>